

Introducción

Hace 15 años ya, Monlab SL empezó la comercialización de un producto, bastante desconocido en nuestro país en ese momento: el material reutilizable para la confección de protectores y baberos, frente a los tradicionales sistemas desechables de celulosa.

Hoy en día ya no es necesario explicar de su existencia a los profesionales sanitarios, aunque su utilización todavía siga siendo considerada como anecdótica, frente a los gastos que se producen en celulosa, y sigamos estando a la cola en su utilización frente a otros países de nuestro entorno.. pero es algo que debe cambiar en los próximos años, sin duda alguna...

Los traveseros reutilizables tienen como finalidad la protección del paciente, de la ropa de cama y del colchón frente a posibles pérdidas de líquidos biológicos. Se colocan encima del colchón, entre la sábana inferior y la superior y el paciente reposa directamente sobre él.

Su principal ventaja es que ahorra el trabajo de cambiar completamente la ropa de cama, ya que la gran mayoría de veces solo hace falta cambiar el travesero. Esa ventaja proporciona sin duda una reducción de los costes de mantenimiento y aumenta la duración de la ropa de cama. Gracias al travesero, ya no serán necesarios ni hules, ni protectores de colchón ni traveseros desechables de un solo uso.

Además, nuestros traveseros proporcionan más comodidad a la hora de mover y girar al paciente.

El coste por utilización es menor que en el caso de material de un solo uso, ya que permiten un uso entre 150 y 300 lavados (dependiendo de la condiciones de lavado de la lavandería)

No necesitan plancha y sus características de composición (superficie acolchada, material absorbente y barrera impermeable) confieren a este producto una máxima garantía de calidad y sobre todo de comodidad, tanto para el profesional como para el paciente.









Baberos

Traveseros ABSO absorción TOTAL

Traveseros ECO absorción moderada

Instrucciones de lavado

Certificados

Baberos

Diseñado especialmente para ofrecer la máxima protección y duración. Compuesto por una tela gruesa de alta calidad y de una barrera impermeable que no se rompe ni deteriora con el uso.

Los baberos no se atan por detrás del cuello ya que tienen un cierre hermético cromado.

Disponemos de baberos con o sin bolsillo inferior. Este bolsillo inferior se monta rápidamente y de forma muy fácil por un sistema de corchetes y es muy útil para evitar derrames y evitar manchas en zona inferior del paciente o en la cama.



Ref. 7029PUBabero de una sola pieza - SIN BOLSILLO



Ref. CT-1W
Babero blanco rizo de una sola pieza - CON BOLSILLO



Ref. CT-1BBabero azul de rizo de una sola pieza CON BOLSILLO



Traveseros ABSO de una sola pieza ABSORCIÓN ULTRA

Empapadores para incontinencia fuerte para pacientes incontinentes encamados. Se colocan fácilmente sobre la sábana inferior. El paciente descansa directamente sobre los empapadores.

Disponibles sin alas, para pacientes pasivos y con alas laterales que se fijan bajo el colchón de forma rápida y segura, para pacientes más activos.

La posibilidad de las asas facilita el trabajo al profesional con pacientes con movilidad limitada.

Fabricados con 5 capas de material. 1º Capa

Capa superior siempre seca y extra-suave en contacto con el paciente, y con tratamiento anti ácaros. 100% Poliéster 160g/m2.

La primera capa transfiere los líquidos a las capas inferiores de manera rápida permaneciendo seca en pocos minutos, para que la persona que está reposando en ella se sienta confortable y seca.

2ª Capa

Capa acolchada intermedia de alta dispersión de la humedad. 100% Poliéster 80g/m2.

3.ª Capa

Capa intermedia súper absorbente que retiene más de 3 Litros por metro cuadrado de tejido. Los líquidos son retenidos en esta capa absorbente interior, protegiendo de esta forma el colchón y la ropa de cama. 80% Poliéster y 20% viscosa 200g/m2.

4ª Capa

Membrana transpirable e impermeable. 100% Poliuretano 40g/m2.

5º Capa


Capa inferior de Protección del colchón. 100% Poliéster 45g/m2.

Pueden ser lavados y reutilizados repetidamente, incrementando su capacidad de absorción con cada lavado.

Sustitutos a los empapadores desechables, de forma más económica y más respetuosa con el medio ambiente.

Áreas de aplicación: Hospitales, Centros Geríatricos, Hostelería, uso particular...

Fabricados cumpliendo la Directiva Médica 93/42/CEE

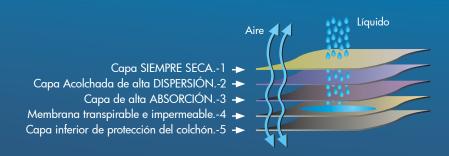

Ref. CT-H2F

Cara inferior

Ref. CT-H2H

Cara inferior




Ref. CT-H2HF

Cara inferior



Empapador incontinencia fuerte de una sola pieza CON ALAS.

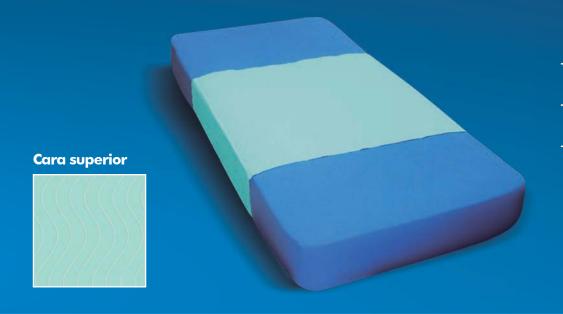

Ref. CT-H2F

Descripción Travesero con alas

Medidas L85xAC90cm Con alas L85xA165cm

Empapador incontinencia fuerte de una sola pieza CON ASAS.



Ref. CT-H2H


Descripción Travesero con asas

Medidas L85xAC90cm

Detalle asas



Empapador incontinencia fuerte de una sola pieza CON ALAS Y ASAS.

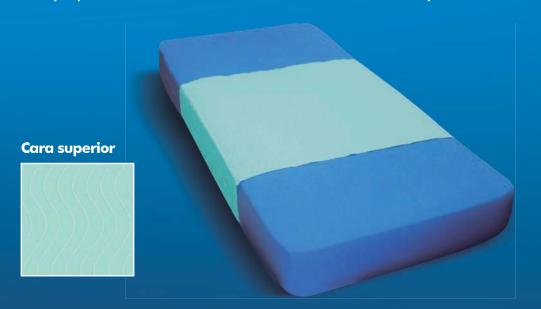

Ref. CT-H2HF

Descripción

Travesero con alas y asas

Medidas L75xAC90cm Con alas L75xA165cm

Detalle asas



Traveseros ECO de una sola pieza ABSORCIÓN MODERADA

Empapadores para incontinencia moderada para pacientes incontinentes encamados.

Línea pensada para incontinencias leves o moderadas, fabricados con 4 capas de material, y que resulta más económica que los traveseros para incontinencias fuertes. Se colocan fácilmente sobre la sábana inferior.

Disponibles sin alas, para pacientes pasivos y con alas laterales que se fijan bajo el colchón de forma rápida y segura, para pacientes más activos.

La posibilidad de las asas facilita el trabajo al profesional con pacientes con movilidad limitada. El paciente descansa directamente sobre los empapadores.

Fabricados con 4 capas de material 1ª Capa

Capa superior siempre seca y extra-suave en contacto con el paciente, y con tratamiento anti ácaros. Esta capa transfiere los líquidos a las capas inferiores de manera rápida permaneciendo seca en pocos minutos, para que la persona que está reposando en ella se sienta confortable y seca. 100% Poliéster 115q/m2.

2ª Capa

Capa intermedia súper absorbente que retiene más de 2 Litros por metro cuadrado de tejido. Los líquidos son retenidos en esta capa absorbente interior, protegiendo de esta forma el colchón y la ropa de cama. 80% Poliéster y 20% Viscosa 225q/m2.

3ª Capa

Membrana transpirable e impermeable. 100% Poliuretano 30g/m2.

4º Capa

Capa inferior de Protección del colchón. 100% Poliéster 60g/m2.

Pueden ser lavados y reutilizados repetidamente, incrementando su capacidad de absorción con cada lavado.

Sustitutos a los empapadores desechables, de forma más económica y más respetuosa con el medio ambiente.

Áreas de aplicación: Hospitales, Centros Geríatricos, Hostelería, uso particular...

Fabricados cumpliendo la Directiva Médica 93/42/CEE



Ref. CT-M2F

Cara inferior




Ref. CT-M2H

Cara inferior



Ref. CT-M2HF

Cara inferior

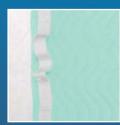

Empapador incontinencia media de una sola pieza CON ALAS.



Ref. CT-M2F

Descripción

Travesero con alas

Medidas L85xAC90cm Con Alas L85xA167cm

Empapador incontinencia media de una sola pieza CON ASAS.



Ref. CT-M2H

Descripción

Travesero con asas

Medidas L85xAC90 cm

Detalle asas



Empapador incontinencia media de una sola pieza CON ASAS Y ALAS.



Ref. CT-M2HF

Descripción

Travesero con asas y alas

Medidas L85xAC90cm Con alas L85xA167cm

Detalle asas



Instrucciones de lavado

Traveseros

- -No lavar a más de 90 °C.
- -Esterilizables por calor húmedo.
- -No utilizar lejia ni derivados con cloro.
- -No necesita planchado.
- -No usar suavizantes.
- -Puede usarse secadora en programa muy suave, 70° C máximo.















Baberos

- -Lavar baberos blancos máximo 90 °C
- -Lavar baberos de color máximo a 40 °C
- -Esterilizables por calor húmedo.
- -No utilizar lejia ni derivados con cloro.
- -No necesita planchado.
- -No usar suavizantes.
- -Puede usarse secadora en programa muy suave, 70° C máximo.



















Calidad y compromiso

Desde Monlab seguimos trabajando para superar nuestras carencias y mejorar nuestro servicio. Para ello, entre otras cosas desde el 2008 hemos ampliamos nuestras instalaciones y nuestra plantilla; hemos incorporado nuevas líneas de productos; hemos ampliado nuestra web y nuestro catálogo todos nuestros procesos: desde el 1999 estamos certificados según ISO9000 y desde el 2000 disponemos de la licencia de importación para productos sanitarios de incontinencia.

En 2009 nos certificamos según iSO9000:2008 y desde 2013 estamos certificados con la norma EN ISO13485:2012 para la gestión de la calidad para productos sanitarios.

En el 2010 celebramos nuestro 25 aniversario como empresa de servicios (1985-2010) .. y en el 2015

MONLAB, S.L.

ISO 13485:2003 EN ISO 13485:2012

The scope of registration appears on page 2 of this certificate









MONLAB, S.L.

ISO 13485:2003 EN ISO 13485:2012







"La sensibilidad hecha calidad" LÍNEA ASISTENCIAL







Tel. 902 99 82 30 Fax 93 436 38 94

www.monlab.com pedidos@monlab.es